

LED MASKA Uživatelská příručka



Název produktu: miin-iMask
Model: Artemis-F

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte uživatelskou příručku

Bezpečnostní informace

1. Bezpečné zacházení s přístrojem

- Pokud zaznamenáte kouř nebo zvláštní zápach z přístroje, okamžitě jej vypněte.
- Používejte pouze kabel a USB adaptér dodaný výrobcem zařízení.
- Přístroj nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení pokud máte mokré ruce.
- V případě bouřky odpojte napájecí kabel.
- Při přesouvání přístroje odpojte napájecí kabel.
- Zařízení používejte pouze na místech bez elektromagnetického rušení.
- Chraňte zařízení před pády a nárazy.
- Pokud se do zařízení dostane vlhkost, nepoužívejte jej a kontaktujte zákaznické centrum.
- Chraňte masku před poškozením ostrými předměty (spony do vlasů, náhrdelníky, nehty, apod.).
- Případné poškozené příslušenství je nutné nahradit pouze novým originálním příslušenstvím.
- V případě neodborného zásahu do zařízení nebude možné provádět odborný záruční/pozáruční servis.
- Nepoužívejte napájecí kabel, pokud má viditelně poškozenou izolaci.
- Napájecí kabel zbytečně neohýbejte ani jinak fyzicky nenamáhejte.
- Nekopírujte hardware ani software zařízení.

2. Nebezpečí poranění

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této příručce.
- Zařízení se doporučuje používat pouze jednou denně.
- Vyvarujte se přímého pohledu do zdroje LED světla. Nadměrný přímý oční kontakt může způsobit poškození očí.
- Pokud jsou vaše oči citlivé na světlo, použijte oční náplasti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte jakékoliv kožní onemocnění nebo poranění.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste za poslední 2 měsíce podstoupili kosmetický chirurgický zákrok nebo procedury proti vypadávání vlasů .
- Máte-li alergickou nebo citlivou pokožku, používejte zařízení po konzultaci s dermatologem.
- Zařízení může způsobit podráždění kůže (zarudnutí). Pokud tato situace nastane, doporučujeme konzultaci s dermatologem.
- Použití přístroje vždy předem konzultujte s odborníkem, pokud platí některá z těchto možností:
 - Máte kardiovaskulární onemocnění, endokrinní abnormalitu, porucha senzorického nervového systému, kožní onemocnění
 - Prodělala jste laserová operace očí, infekční onemocnění, epilepsii
 - Užíváte léky na hormonální nerovnováhu
- Nenechávejte zařízení v automobilu, na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Neskladujte ani nepoužívejte zařízení na horkém a vlhkém místě.
- Chraňte zařízení před dětmi.
- Nedoporučujeme přístroj používat během těhotenství, menstruace a kojení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte alergii na sluneční světlo.
- Zařízení nepoužívejte při řízení nebo při chůzi.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné lékařské elektronické zařízení.



3. Péče o baterii

- Poškozená baterie představuje nebezpečí výbuchu. Baterii nikdy nerozebírejte
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- Zařízení se prodává s nenabitou baterií, před použitím ji nabijte.


4. Skladování a údržba

- Neuchovávejte zařízení na špatně dostupných místech.
- Uchovávejte zařízení mimo vyhřívané místo. Může způsobit požár.
- Zabraňte pádu zařízení nebo nabíjecího adaptéru do vody nebo jakéhokoliv vlhkého prostředí.
- Kabel umístěte mimo vyhřívaný povrch.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti těkavých kapalin.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
- Nevkládejte zařízení do myčky, trouby, pračky.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík. Pokud je povrch příliš špinavý, použijte navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte agresivní prostředky, jako jsou alkohol, benzen nebo ředidlo, mohly poškodit povrch přístroje.
- Nenechávejte zařízení v autě, na slunci nebo v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Zařízení skladujte mimo horká a vlhká místa.

Jednotlivé části zařízení

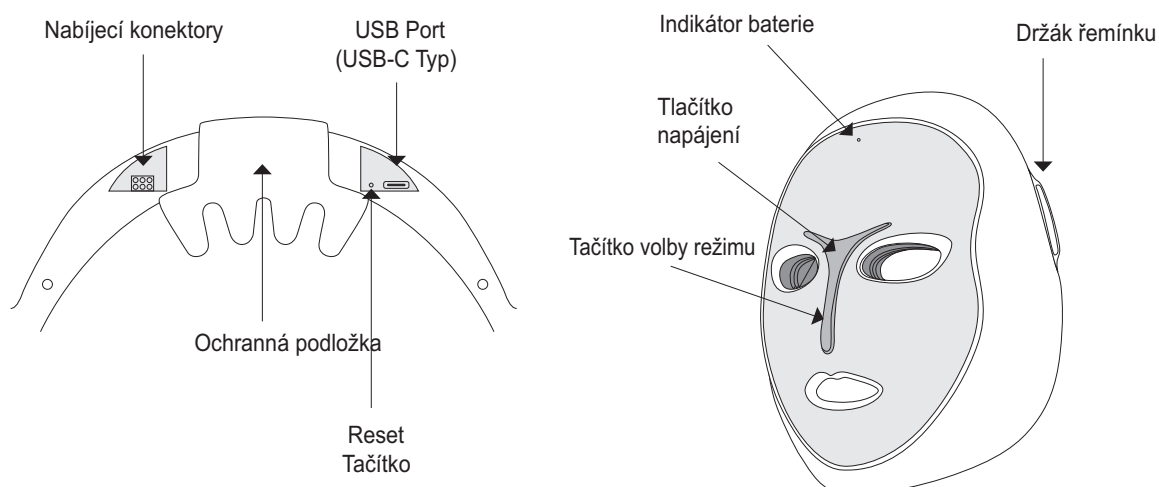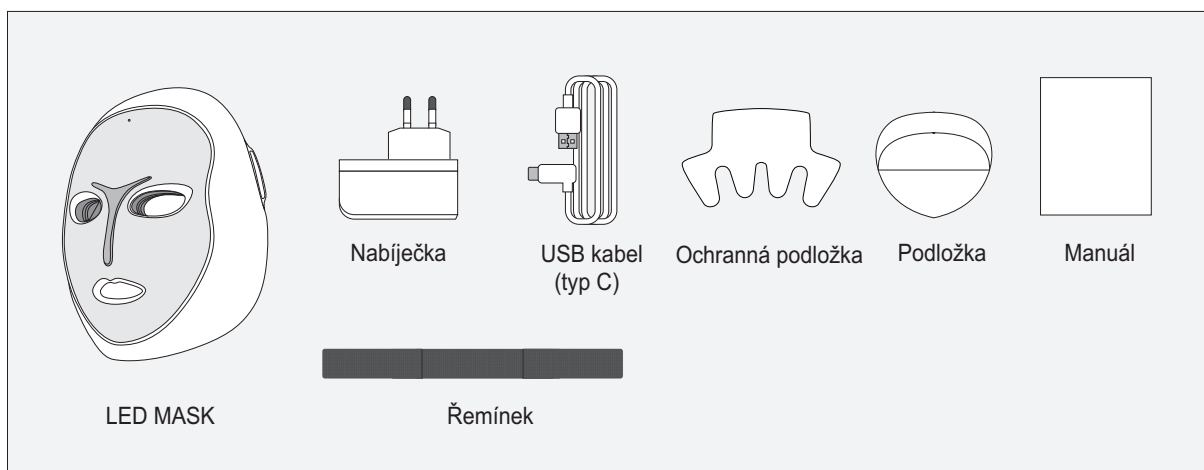

Nabíjení baterie

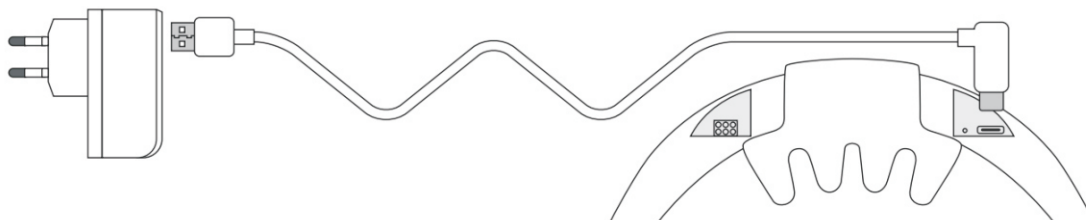


1. Připojte USB kabel k nabíječce.
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Připojte USB kabel k masce.
4. Barva kontrolky se mění dle stavu nabití.
 - Doba nabíjení baterie závisí na teplotě, a stavu baterie.
 - Běžná nabíjecí doba je 3.5 hodiny.
 - Přístroj lze možné používat i během nabíjení.
 - Baterii byste měli nabíjet, když kontrolka svítí červeně.

Stav baterie	LED barva
Plně nabitó	Modrá
Dostatečně	Modrá bliká
Středně	Zelená bliká
Málo	Červená bliká
Nedostatečně	Červená


Před použitím přístroje



Omyjte obličej
základní kosmetikou

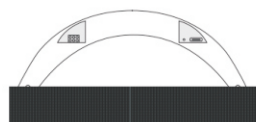

Nastavte řemínek,
aby maska držela

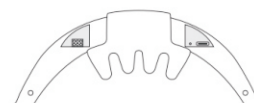


Pokud je váš obličej malý,
využijte gumovou vložku



Masku nasadte
směrem shora dolů


Informace k používání zařízení

Tlačítko napájení

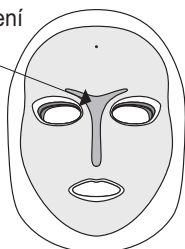

Zapnutí přístroje

Dlouze stiskněte tlačítko napájení
Dejte jej déle než 1s, zařízení se zapne

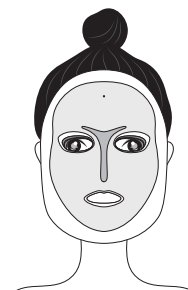

Režim Skincare


3 sekundy po zapnutí
Automaticky se zapne správa zařízení

1. Přístroj se zapne stisknutím tlačítka napájení po dobu 1s. (Rozsvítí se LED indikátor)
2. Režim Skincare se spustí automaticky po 3s. (Výchozí nastavení : Normal mode (červená))
3. Režim Skincare se zastaví po 10 minutách. (Výchozí nastavení: 10 minut)
4. Po ukončení režimu Skincare se přístroj po 3s vypne.
5. Přístroj lze kdykoliv vypnout přidržením tlačítka napájení po dobu 1s.

* Čas a intenzita Skincare je nastavitelná v mobilní aplikaci.

Přepínání běžných režimů

(Krátký stisk)

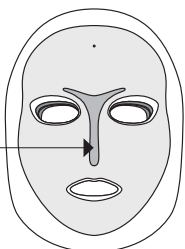


Přepínání běžných režimů (Normal mode)

Krátkým stiskem změníte běžný režim
v průběhu trvání ošetření
(Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový → Světle modrý)

Přepínání automatických režimů

(Dlouhý stisk)

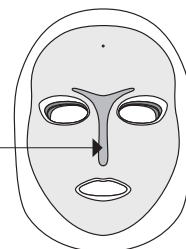


Přepínání automatických režimů

Stiskem po dobu 1s změníte automatický režim v průběhu trvání ošetření
(Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 → Auto 4 → Auto 5 → Auto 6 → Auto 7)

1. Přepínání běžných režimů (Normal mode)
 - Krátkým stiskem vždy nastavíte / změníte běžný režim
 - Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový → Světle modrý
2. Přepínání automatických režimů
 - Z běžného módu do automatického přístroj přepnete stiskem tlačítka po dobu 1s
 - Kdykoliv stisknete tlačítko po dobu 1s, nastavíte / změníte automatický režim
Auto 1 → Auto 2 → Auto 3 → Auto 4 → Auto 5 → Auto 6 → Auto 7

* Další režimy péče lze pohodlně vybrat pomocí mobilní aplikace.

Tlačítko režimu
(Stiskněte krátce)

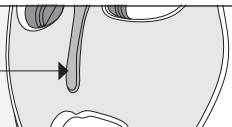

Režim se změní pokaždé, když se stisknete tlačítko.
(Červený → Zelený → Modrý → Žlutý → Fialový → Světle modrý)



Běžný režim 1
(ČERVENÝ)

Pružnost a
omlazení




Běžný režim 2
(ZELENÝ)

Tone-up pleti



Běžný režim 3
(MODRÝ)

Mastná pleť

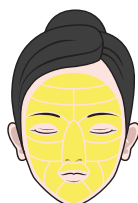

Běžný režim 4
(ŽLUTÝ)

Redukce
zarudnutí



Běžný režim 5
(FIALOVÝ)


Hlubkové čištění
Léčba po zákrocích



Běžný režim 6
(SVĚTLE MODRÝ)

Hydratace

Tlačítko režimu
(Stiskněte dlouze)

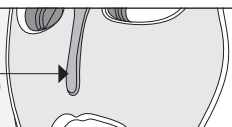

Režim se změní vždy po dlouhém stisku (1s).
Automatický režim 1 → Automatický režim 2 ••• Automatický režim 7



Auto režim 1
(Elasticity Care)

Pružnost,
regenerace



Auto režim 2
(Trouble Care)

Akné, po kosmetické
proceduře



Auto režim 3
(Whitening Care)

Bělení, redukce zarudnutí




Auto režim 4
(Skin Soothing, Moisturizing)

Pro citlivou pleť,
rovnováha hydratace



Auto režim 5
(Homme Care)

Po holení
péče o pružnost

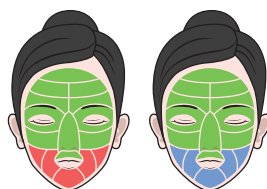

Auto režim 6
(V-line Care)

Intenzivní péče o bradu



Auto režim 7
(Fine dust care)

Péče o jemnou pokožku

Instalace mobilní aplikace

Android	<ul style="list-style-type: none"> • Obchod Play → Hledat “iMask” → Nainstalovat • Zaregistrujte váš model v aplikaci. 	 
iOS	<ul style="list-style-type: none"> • App Store → Najít “iMask” → Nainstalovat • Zaregistrujte váš model v aplikaci. 	 
Zadání aktivačního kódu	<ul style="list-style-type: none"> • Po instalaci budete vyzváni k zadání aktivačního kódu • Zapište “1 2 3 4 5 6 7 8 9 0” (10 číslic) v tomto pořadí. 	
Bluetooth připojení	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth se aktivuje po zapnutí masky • Zvolte “miin-iMask-xxxx” v seznamu zařízení k připojení. 	
Minimální požadavky pro mobilní aplikaci	<ul style="list-style-type: none"> • Android Phone : OS – Android 6.0 nebo vyšší / Displej – 1080 x 1920 nebo vyšší • iPhone : OS – iOS 11.0 nebo vyšší / Display – 750 x 1334 nebo vyšší 	

Řešení problémů

Problém	Řešení
Přístroj se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie může být vybitá, nabijte ji. • Zařízení může být používáno i během nabíjení. • Zkontrolujte správné propojení kabelů. • Zkontrolujtem zda-li nabíječka funguje. • Zkontrolujte správně nastavenou hodnotu elektrického napětí. • Pokud se baterie rychle vybíjí, kontaktujte servisní středisko.
Zařízení nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy. ** Tlačítko napájení není dotykové. • Na dotykové tlačítko netlačte, pouze se jej dotkněte (Krátký dotek : Mění varianty běžného režimu, Dlouhý dotek: Mění automatický režim) • Vyzkoušejte zařízení po plnohodnotném nabití. • Zkontrolujte, zda svítí LED indikace stavu baterie.
Indikátor stavu nabití nesvítí	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte zapojení USB kabelu k nabíječce. • Zkontrolujte zapojení nabíječky do el. zásuvky. • Zkontrolujte všechny USB kabely • Pokud problém nevyřešíte, kontaktujte servisní středisko.
Zařízení se zahřívá	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení se zahřívá při nabíjení i při používání, nemá to vliv na životnost.

Specifikace

Název produktu	miin-iMask	LED	RGB LED, IR LED
Model	Artemis-F	Provozní doba	Běžně : 10 minut (Možnosti 1-30 minut)
Váha	429 g	Max. nepřetržitý provoz	2 hodiny
Rozměry	205 (W) X 260 (D) X 135 (H) mm	Doba do plného nabití	3.5 hodiny
Napájecí adapter	Input : 100~240V, 50/60Hz Output : 5V, 2A	Provozní teplota Vlhkost	0~35 C, 0%~90%
Baterie	3.7V, Li-ion, 3000mAh	Doporučené užívání	10 - 20 minut / Denně / 1 osoba *

* Doporučené užívání 10 - 20 minut je pro ošetření jedné osoby, masku lze používat libovolně pro více osob.

Poškození, na které se nevztahuje zákonná záruční lhůta:

- Pokud dojde k poruše způsobené cizími látkami v produktu (voda, nápoje, káva, hračky atd.)
- V případě poškození produktu nebo poruchy v důsledku pádu nebo nárazu
- V případě poškození povrchu nebo deformace způsobené chemickými látkami.
- Pokud přístroj není používán spolu s originálním příslušenstvím (nabíječka, USB kabely, ...)
- V případě napájení produktu nesprávným napětím.
- Po svévolném rozebrání zařízení nebo ztrátě příslušenství.

Záruční podmínky

1. Tento produkt je vyráběn v souladu s přísnou kontrolou kvality výrobků a procesem zkoušek společnosti MiinSystems Co., Ltd.
2. Záruční oprava je bezplatná, pouze pokud dojde k poruše při běžném používání produktu.
3. Veškerý pozáruční servis je zpoplatněn.

Název produktu	miin-iMask	Záruční lhůta	od data nákupu 1 rok
Model	Artemis-F		
Sériové č.			
Datum prodeje			
Adresa zákazníka			
Jméno zákazníka		tel	

- Záruční oprava zdarma
V případě, že dojde k poruše do 12 měsíců od zakoupení, bezplatná oprava bude umožněna v případě, že produkt byl používán v souladu se záručními podmínkami
- Zpoplatněná oprava
Oprava je zpoplatněna v těchto případech:
 - Porucha byla způsobena nesprávným používáním ze strany uživatele
 - Vypršela záruční doba.
 - Porucha byla způsobena nedbalostí uživatele.
 - Porucha byla způsobena neodborným zásahem do zařízení.